

VORTEX™

Non Electrostatic Valved Holding Chamber



Specialists in effective inhalation

SINGLE PATIENT USE
LATEX FREE ■ DISHWASHER SAFE
SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician. Use only when prescribed by a physician and with the prescribed medication. Read all warnings and instructions before use. Use the product only for its intended use as described in these Instructions For Use. Improper use can result in serious or fatal illness/injury.

WARNING

1. Close supervision is necessary when this product is used by children or near the physically or mentally impaired. This device contains small parts that may present a choking hazard to small children. Always keep out of the reach of children three years old and under. All parts should be seated firmly in place. Use of an improperly assembled PARI VORTEX™ Non Electrostatic Valved (N.E.V.) Holding Chamber could prevent adequate delivery of medication. If not sure of the suitability and/or functioning of your MDI, consult MDI instructions and/or your physician.
2. To reduce the risk of infection, illness or injury from contamination and to reduce the risk of improper performance and treatment, you must thoroughly clean and dry all parts of the PARI VORTEX™ as instructed on reverse side.
3. To reduce the risk of improper treatment, use only PARI accessories (e.g. masks).
4. To reduce the risk of improper treatment, product should be replaced if valves or parts are damaged or missing.
5. To reduce the risk of improper treatment, make sure duckbill valve is properly fitted.
6. If unsure on how to use this product, talk to your physician or pharmacist.
7. Administer medication per MDI instructions.

AVIS

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que sur ordonnance médicale. Utiliser uniquement avec le médicament prescrit et selon l'ordonnance du médecin. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant l'utilisation. Respecter les utilisations prévues pour le produit, tel qu'indiqué dans le mode d'emploi. Un usage abusif peut entraîner une blessure grave ou la mort.

AVERTISSEMENT

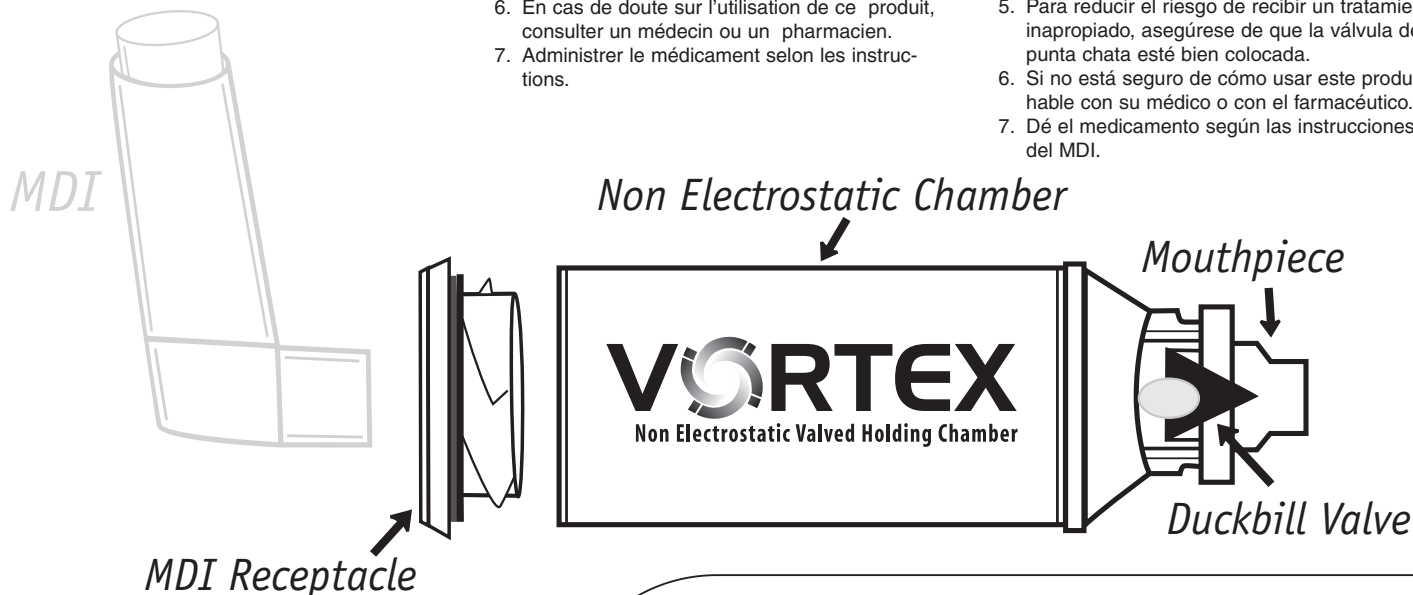
1. Une étroite surveillance est recommandée lorsque cet appareil est manipulé par des enfants ou utilisé à proximité de personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. La chambre d'inhalation contient de petites pièces que les jeunes enfants peuvent avaler. Garder hors de la portée des enfants de trois ans ou moins. Toutes les pièces doivent être solidement fixées. L'assemblage inadéquat de la chambre d'inhalation peut entraver la délivrance du médicament. En cas de doute quant à l'utilisation ou le fonctionnement de l'aérosol-doseur, relire les instructions ou consulter un médecin.
2. Afin de réduire les risques d'infection, de blessure ou de maladie et assurer l'efficacité du traitement, nettoyer et faire sécher toutes les pièces de la chambre d'inhalation avec soin, selon les instructions apparaissant au verso.
3. Afin d'assurer l'efficacité du traitement, utiliser exclusivement les accessoires d'oxygénothérapie PARI (par exemple le masque facial).
4. Afin d'assurer l'efficacité du traitement, remplacer l'appareil si la valve ou une autre pièce est endommagée ou perdue.
5. Afin d'assurer l'efficacité du traitement, toujours vérifier que la valve en bec-de-canard est bien installée.
6. En cas de doute sur l'utilisation de ce produit, consulter un médecin ou un pharmacien.
7. Administrer le médicament selon les instructions.

PRECAUCIÓN

La ley federal de los Estados Unidos exige que este aparato sea vendido por, o bajo receta de, un médico. Utilícelo sólo cuando sea recetado por un médico y con el medicamento recetado. Lea todas las precauciones e instrucciones antes de usarlo. Use este producto sólo para los fines apropiados según se describe en estas instrucciones para su uso. El uso inapropiado de este aparato puede causar una enfermedad/lesión seria o fatal.

ADVERTENCIA

1. Es necesaria la supervisión cuidadosa cuando este producto es usado por niños o cerca de personas discapacitadas física o mentalmente. Este aparato contiene partes pequeñas que pueden asfixiar a un niño pequeño. Siempre debe ser mantenido lejos del alcance de los niños menores de tres años. Todas las partes deben estar firmemente colocadas en su sitio. Utilizar un PARI VORTEX™ con cámara de retención N.E.V. mal armado puede obstaculizar la administración adecuada del medicamento. Si no está seguro de que el MDI es apropiado y/o funciona bien, consulte las instrucciones del MDI y/o con su médico.
2. Para reducir el riesgo de infección, enfermedad y lesión a causa de contaminación y para reducir el riesgo de un funcionamiento y tratamiento inapropiados, usted debe limpiar, desinfectar (o esterilizar) y secar bien todas las partes del PARI VORTEX™ con cámara de retención N.E.V. tal como se indica del otro lado de este documento.
3. Para reducir el riesgo de recibir un tratamiento inapropiado, use sólo accesorios de equipo respiratorio de PARI (por ejemplo, máscaras).
4. Para reducir el riesgo de recibir un tratamiento inapropiado, el producto debe ser reemplazado si las válvulas o las partes son dañadas o faltan.
5. Para reducir el riesgo de recibir un tratamiento inapropiado, asegúrese de que la válvula de punta chata esté bien colocada.
6. Si no está seguro de cómo usar este producto, hable con su médico o con el farmacéutico.
7. Dé el medicamento según las instrucciones del MDI.



PARI VORTEX™ N.E.V. HOLDING CHAMBER has a 6 month limited warranty for home use.



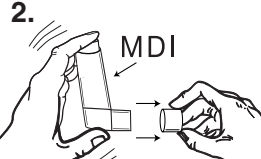
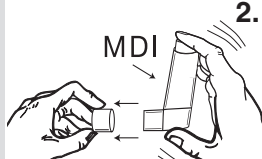
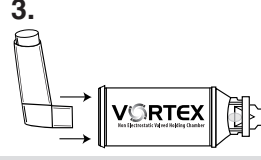
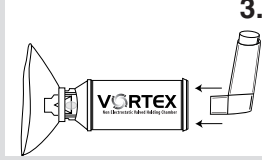
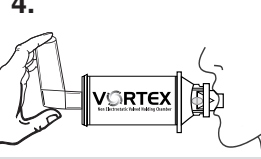
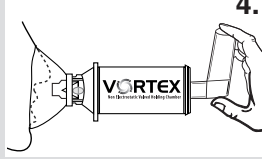
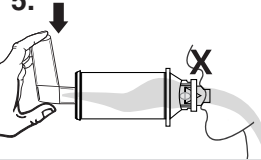
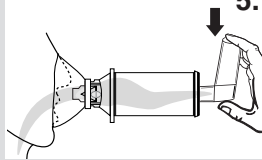
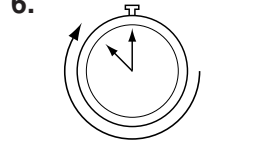
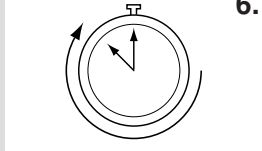


PARI RESPIRATORY EQUIPMENT, INC.
3 Justin Court, Monterey, California 93940
Tel 831.658.0901 / Fax 1.800.727.4112
(USA and CANADA) 1.800.FAST.NEB (327.8632)

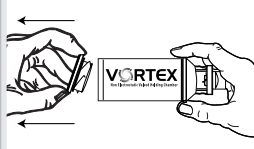


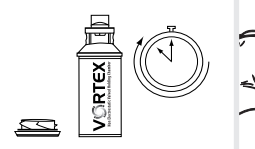
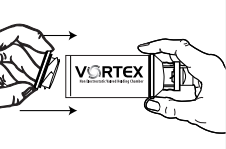
www.PARI.com
E-mail ProductInfo@PARI.com
Respiratory CEU programs available
© 2002 PARI Respiratory Equipment, Inc.
Patents Pending Part #51D5000 Rev A 04/02

INSTRUCTIONS FOR USE - PARI VORTEX™ Non Electrostatic Valved (N.E.V.) Holding Chamber

IMPORTANT: Follow instructions included with your metered dose inhaler (MDI)

M O U T H P I E C E			F A C E M A S K		
1. 	Look for foreign objects, damaged and/or missing parts.	S'assurer que la chambre d'inhalation ne contient aucun corps étranger et qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante.	Fíjese si hay objetos extraños, partes dañadas y/o faltantes.	1. 	
2. 	Shake metered dose inhaler (MDI) per instructions. Remove cap.	Secouer l'aérosol-doseur selon les instructions du fabricant. Retirer le capuchon.	Sacuda el inhalador de dosis medida MDI según las instrucciones. Quite la tapa.	2. 	
3. 	Insert MDI into MDI receptacle back of PARI VORTEX™.	Insérer l'aérosol-doseur dans l'arrière de la chambre d'inhalation PARI VORTEX™.	Inserte el MDI en la parte de atrás de la cámara de retención del PARI VORTEX™.	3. 	
4. 	Place mouthpiece into mouth. Alternatively, attach optional mask and apply mask to face.	Introduire l'embout dans la bouche, ou bien fixer le masque facial facultatif et l'appliquer sur le visage.	Coloque la boquilla en la boca. Alternativamente, coloque la máscara opcional y coloque la máscara sobre el rostro.	4. 	
5. 	Depress MDI. Inhale slowly and deeply. Hold breath if possible. If using mask, maintain good seal for 2-3 breaths after depressing MDI.	Appuyer sur l'aérosol-doseur. Inspirer lentement et profondément, puis retenir la respiration, si possible. Pour inhalation avec le masque facial : après avoir appuyé sur l'aérosol-doseur, maintenir fermement le masque sur la bouche et le nez pendant deux ou trois respirations.	Apriete el MDI. Comience a inhalar lentamente y profundamente, luego contenga el aliento de ser posible. Si está usando una máscara, mantenga la unidad bien sellada durante 2-3 inhalaciones después de apretar el MDI.	5. 	
6. 	Wait as prescribed per MDI instructions before repeating steps 4-5.	Attendre le temps prescrit par le médecin avant de répéter les étapes 4 et 5.	Espere según las instrucciones del MDI antes de repetir los pasos 4-5.	6. 	

INSTRUCTIONS FOR CLEANING / INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE / INSTRUCCIONES DE LAVADO

Option A WASHING BY HAND	1	2	3	4	5
					
Clean PARI VORTEX™ Holding Chamber only as per instructions before first use, then weekly.	Remove metered dose inhaler (MDI) receptacle. Remove mask (optional).	A. Soak parts for 15 minutes in luke warm water with liquid detergent. Agitate gently. OR B. Place in top shelf of dishwasher.	A. Rinse in clean water. Shake out in sink. OR B. Remove from dishwasher. Shake out excess water.	Thoroughly air dry in vertical position on a clean, lint-free cloth or on a drying rack.	Replace MDI receptacle and mask (optional) when unit is completely dry and ready for use.
Nettoyer la chambre d'inhalation à valve antistatique PARI VORTEX™ selon les instructions suivantes avant la première utilisation, puis à toutes les semaines.	Retirer la douille de l'aérosol-doseur. Retirer le masque facial (facultatif).	A. Laisser tremper les pièces pendant 15 minutes dans de l'eau tiède additionnée de détergent liquide. Agiter doucement. OU B. Mettre les pièces dans le panier supérieur du lave-vaisselle.	A. Rincer à l'eau claire. Secouer au-dessus de l'évier. OU B. Retirer du lave-vaisselle. Secouer pour éliminer l'excédent d'eau.	Laisser sécher à la verticale sur un linge propre non pelucheux ou sur un séchoir.	Lorsque les pièces sont bien sèches et prêtes à être utilisées, replacer la douille de l'aérosol-doseur et le masque facial (facultatif).
Limpie el la cámara de contención de PARI VORTEX™ sólo según las instrucciones antes del primer uso y luego semanalmente.	Quite el receptáculo del inhalador de dosis medida (MDI). Quite la máscara (opcional).	A. Coloque las partes en remojo en agua tibia con detergente líquido por 15 minutos. Agite suavemente. O B. Colóquelas en el estante superior de la lavadora de platos.	A. Enjuague con agua limpia. Sacuda en la piletta. O B. Saque del lavaplatos. Elimine el agua excesiva sacudiendo.	Seque completamente al aire en posición vertical sobre una tela limpia y libre de pelusa o sobre una rejilla para secar.	Vuelva a colocar el receptáculo MDI y la máscara (opcional) cuando la unidad está totalmente seca y lista para ser usada.
Option B DISHWASHER	